

本資料ではオンライン資格確認等システムを使うためのマイナ資格確認アプリのセットアップ作業と、同アプリの使い方について説明します。

※本資料は、Android16で作成しています。使用バージョン、機種などによりアプリ取得時の認証方法や画面イメージが異なる場合があります。


※マイナ資格確認アプリでは、スクリーンショット画面は情報が見えない状態で表示されます。

※本資料に記載されているURLは予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本資料は、2026年3月時点の内容をもとに作成しています。

準備する

アプリのセットアップの前に、以下のものが揃っているか、確認してください。

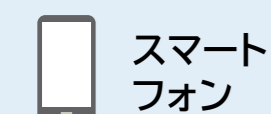

スマートフォン

又は



タブレット


資格確認限定型端末(スマートフォン又はタブレット)

資格確認限定型端末(スマートフォン又はタブレット)は、オンライン資格確認等システムを利用するために必要です。

Android 10以降の端末でダウンロードできますが、動作確認についてはAndroid 11以降のスマートフォンおよびタブレットで動作確認済みです。

※1 上記のOSバージョンを満たしている場合でも、端末の仕様、設定、使用状況などにより、ご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※2 スマートフォンを使用する場合、NFCの設定を有効にしてください(P.33参照)。

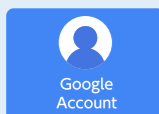

Google
アカウント

Google アカウント

マイナ資格確認アプリの入手時に必要です。

※本マニュアルではGoogleアカウントは取得済みかつサインイン済みであることを前提に説明しています。Googleアカウントの詳細はGoogleのホームページを参照してください。(https://www.google.com/intl/ja/account/about/)



マイナ資格確認アプリ
ユーザ設定情報


マイナ資格確認アプリユーザ設定情報

総合ポータルサイトにおいて、マイナ資格確認アプリ利用開始申請に伴い発行されたマイナ資格確認アプリユーザ設定情報は、オンライン資格確認等システムを利用するアプリの初期登録時に必要です。

セットアップの流れ

※カードリーダーでマイナンバーカードを読み取る場合に実施

マイナ資格確認アプリのセットアップの作業の流れは以下のとおりです。

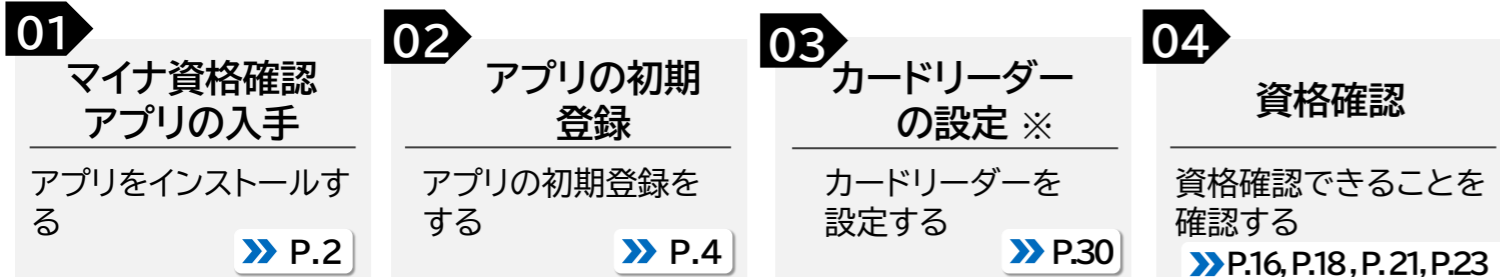

アプリをセットアップする

スマートフォン又はタブレットに、オンライン資格確認等システムの接続に必要なアプリをインストールします(複数の端末を使用する場合は、台数分同じ作業を実施してください)。

1 マイナ資格確認アプリをインストールする >> P.2

2 アプリの初期登録をする >> P.4

※タブレットを使用する場合は、初期登録後、カードリーダーを設定してください。 >> P.30

アプリの設定をする

アプリの設定はいつでも変更できます。設定を変更する場合は、メニュー及びセキュリティ設定のメニューを使用します。また、実施機関からのお知らせをメニューから確認できます。

3 メニューの使い方 >> P.6

4 セキュリティ設定	資格確認結果検索	目視確認で本人認証	>> P.7
	アカウントパスワード設定	デバイス登録解除	
	ログインパスワード設定	ログアウト	

アプリを使って資格を確認する

アプリを起動して、実物のマイナンバーカード又はスマートフォンのマイナンバーカードを使用して、資格を確認できます。

※アプリの初期登録が完了していないと資格確認できません。

5 アプリを起動する >> P.14

6 実物のマイナンバーカードを用いて資格を確認する(目視確認) >> P.16

7 実物のマイナンバーカードを用いて資格を確認する(暗証番号) >> P.18

8 スマートフォンのマイナンバーカードを用いて資格を確認する(iPhone) >> P.21

9 スマートフォンのマイナンバーカードを用いて資格を確認する(Android) >> P.23

10 資格確認結果画面の見方 >> P.26



11 実物のマイナンバーカードを健康保険証として利用する >> P.28



実物のマイナンバーカードを目視確認によって資格確認を行う画面、又は患者に実物のマイナンバーカードの暗証番号を入力してもらって資格確認を行う画面のどちらを既定で表示するかを選択できます。初期登録後は、目視確認する画面になっています。設定を変更する場合は、P.11を参照してください。※スマートフォンのマイナンバーカードを用いた資格確認については、いずれの設定を選択している場合でも利用可能です。

1 マイナ資格確認アプリをインストールする

マイナ資格確認アプリ(以下「アプリ」)をインストールする手順を説明します。
本作業は、資格確認を行うスマートフォン又はタブレットを使って進めてください。

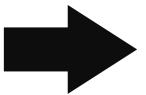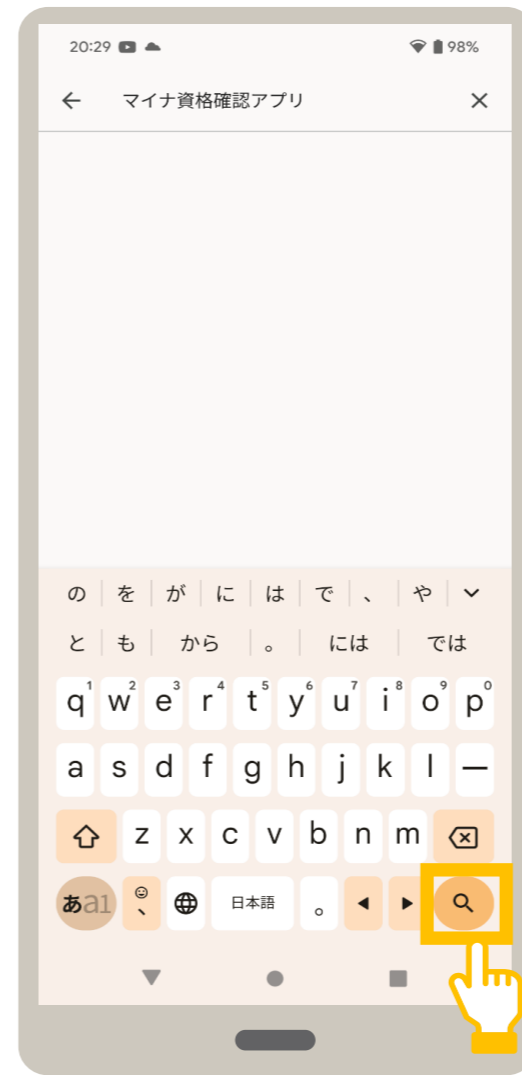

01

Playストアを起動します。

Playストアをタップします。

02

アプリを検索します。



検索ボックスをタップして、キーワード欄に、マイナ資格確認アプリと入力します。

検索を続行する場合は、虫眼鏡をタップします。

03

アプリを入手します。

マイナ資格確認アプリのインストールをタップします。

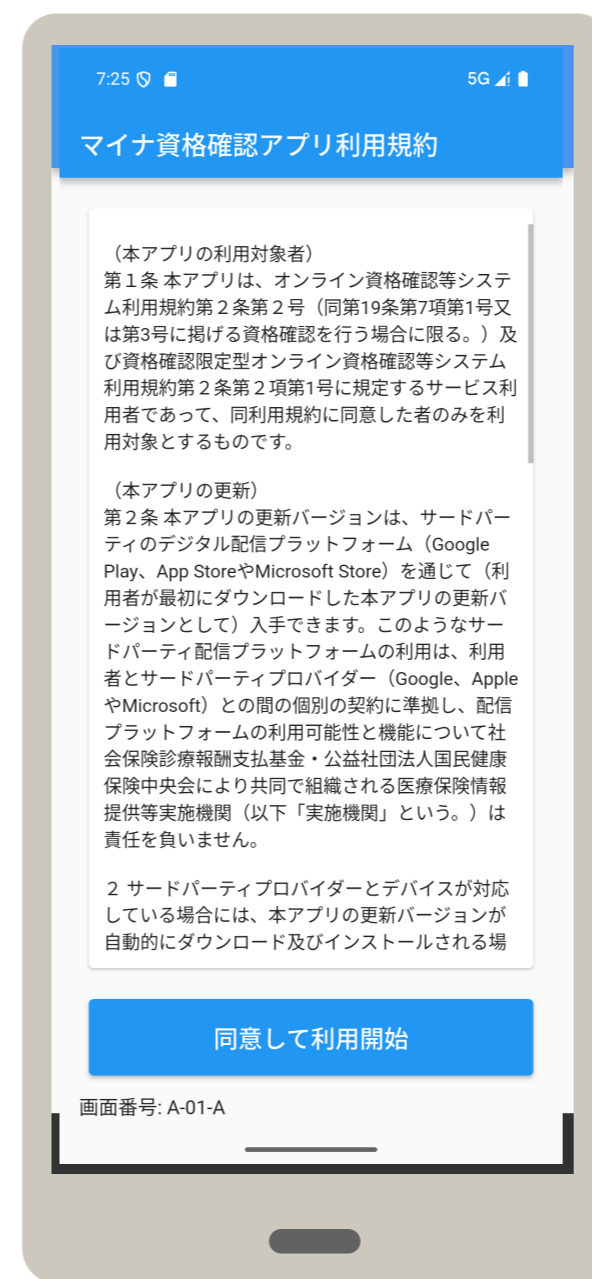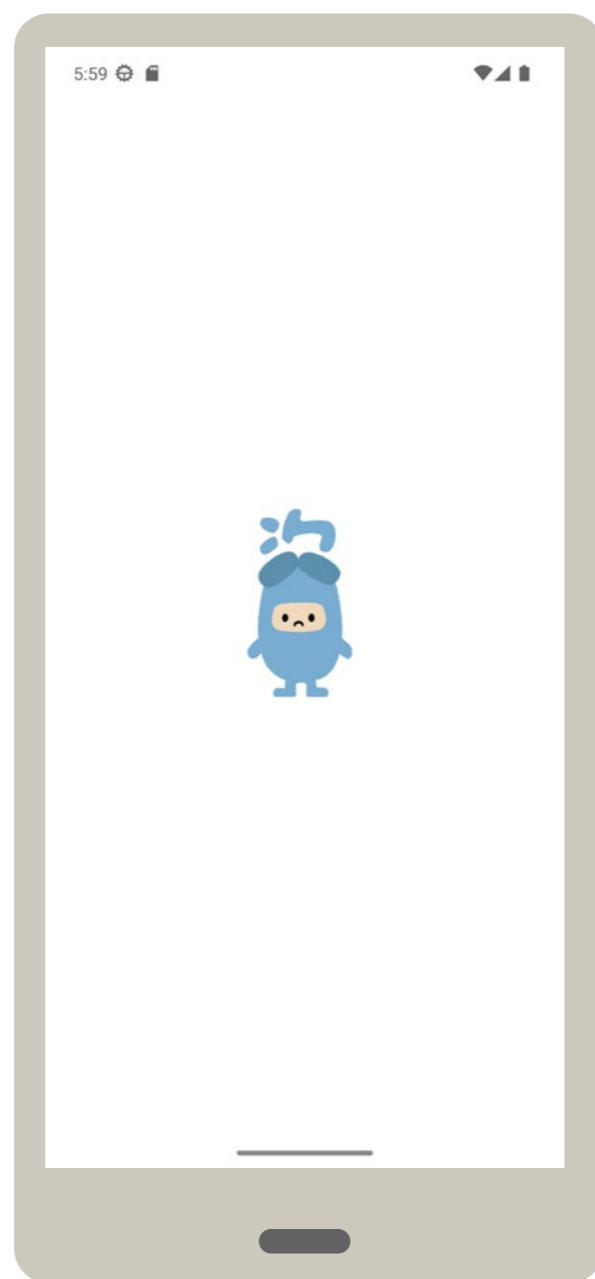

04

アプリを開きます。

インストールが開くに切り替わると、インストールは完了です。

アプリを開く場合は、開くをタップします。

05

アプリが起動します。

アプリが起動し、利用規約が表示されます。
アプリのインストールが完了しました。

アプリ経由でオンライン資格確認等システムを利用するための機関コードやID、パスワード等を登録する手順を説明します。初期登録を行ったスマートフォン又はタブレットのみが資格確認できます。



01

利用規約を確認・同意します。

アプリを初めて起動すると、利用規約が表示されます。

利用規約の内容を確認後、利用規約に同意する場合は、**同意して利用開始**をタップします。

02

機関コード、ID等を入力します。

初期登録が表示されます。

総合ポータルサイトで発行したマイナ資格確認アプリユーザ設定情報を参照しながら、各項目を入力します。入力した内容によれば、**登録する**をタップします。

必須 マークの項目は必ず入力してください。



03

初期登録を完了します。

登録完了メッセージが表示されます。

OKをタップします。

続いて、パスコードを登録します。

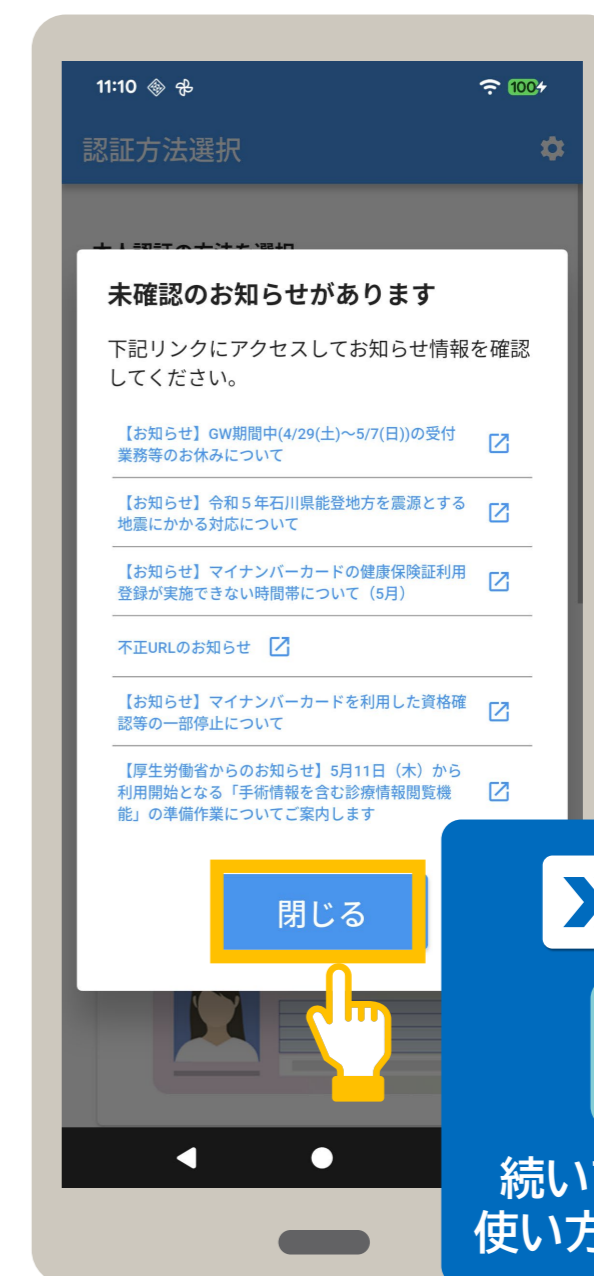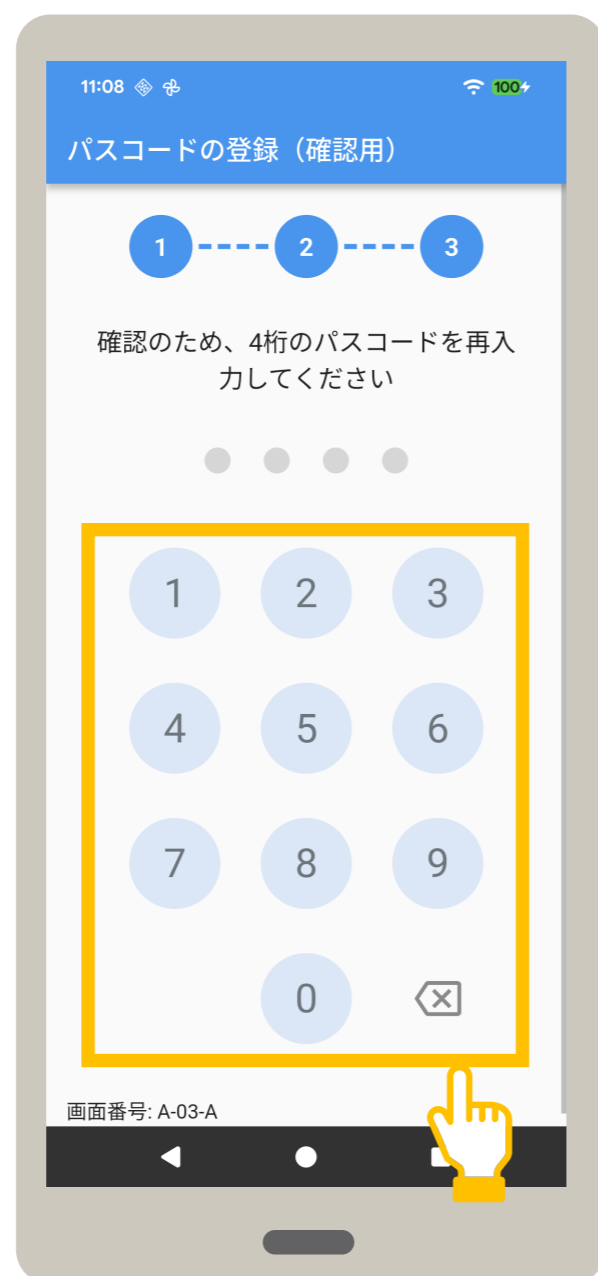

▶▶ P.6

続いてメニューの
使い方を確認します

04

パスコードを登録します。

パスコードの登録が表示されます。アプリ起動時に使用するパスコード(任意の数字4桁)をタップします。

- パスコードの登録(確認用)が表示されます。
- パスコード(任意の数字4桁)を再度タップします。

登録完了メッセージが表示されます。OKをタップします。

05

初期登録が完了しました。

お知らせが表示されます。お知らせを確認し(任意)、閉じるをタップします。初期登録が完了しました。

メニューについて説明します。認証方法選択画面の右上にある⚙️(歯車)をタップするとメニューが表示されます。

メニューでは、本アプリの設定や、実施機関からのお知らせなどを確認できます。

また、セキュリティ設定メニューでは本アプリのアカウントパスワード変更や、認証選択で表示される既定の認証方法の選択、デバイス登録解除などを行えます。🔗マークがあるメニューは、専用のWebサイトに接続し、内容を確認できます。


● 認証方法選択画面




● メニュー



● 利用規約

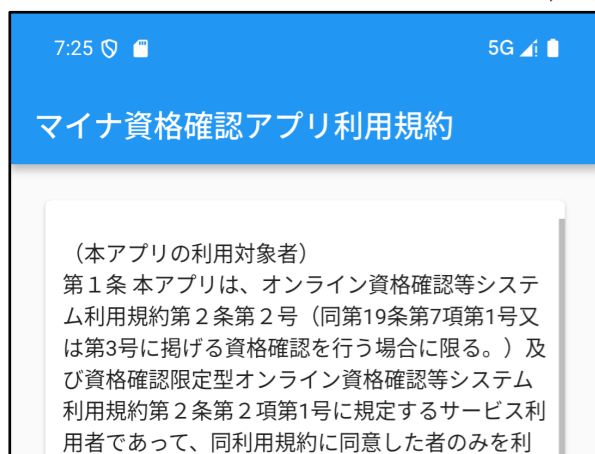

● ライセンス

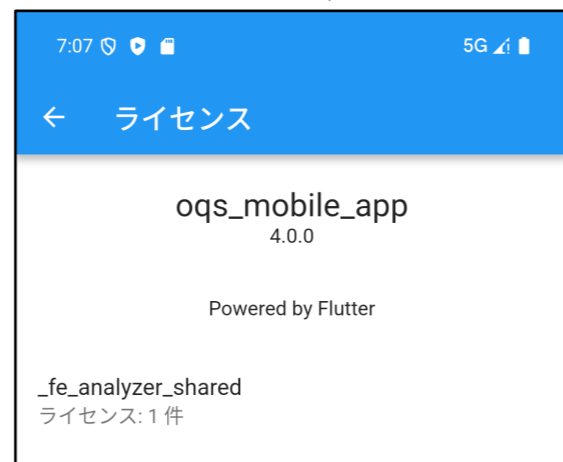

● セキュリティ設定



セキュリティ設定を表示する場合、生体認証又はパスコードの入力が必要です。

機種ごとのマイナンバーカード読み取り位置の説明を確認します。専用のWebサイトに接続します。

実施機関からのお知らせを確認します。専用のWebサイトに接続します。

➡️ P.30

資格確認限定型オンライン資格確認等システムの利用規約を確認します。専用のWebサイトに接続します。



本アプリにおける個人情報の取り扱い方針などを確認します。専用のWebサイトに接続します。

- ➡️ P.7
- ➡️ P.9
- ➡️ P.10
- ➡️ P.11
- ➡️ P.12
- ➡️ P.13

前の画面に戻る

画面左上の ← をタップすると前の画面に戻ります。
例)セキュリティ設定メニューの← をタップするとメニューに戻ります。

過去に来院した患者の資格確認結果を閲覧することができます。資格確認結果を検索する手順について説明します。

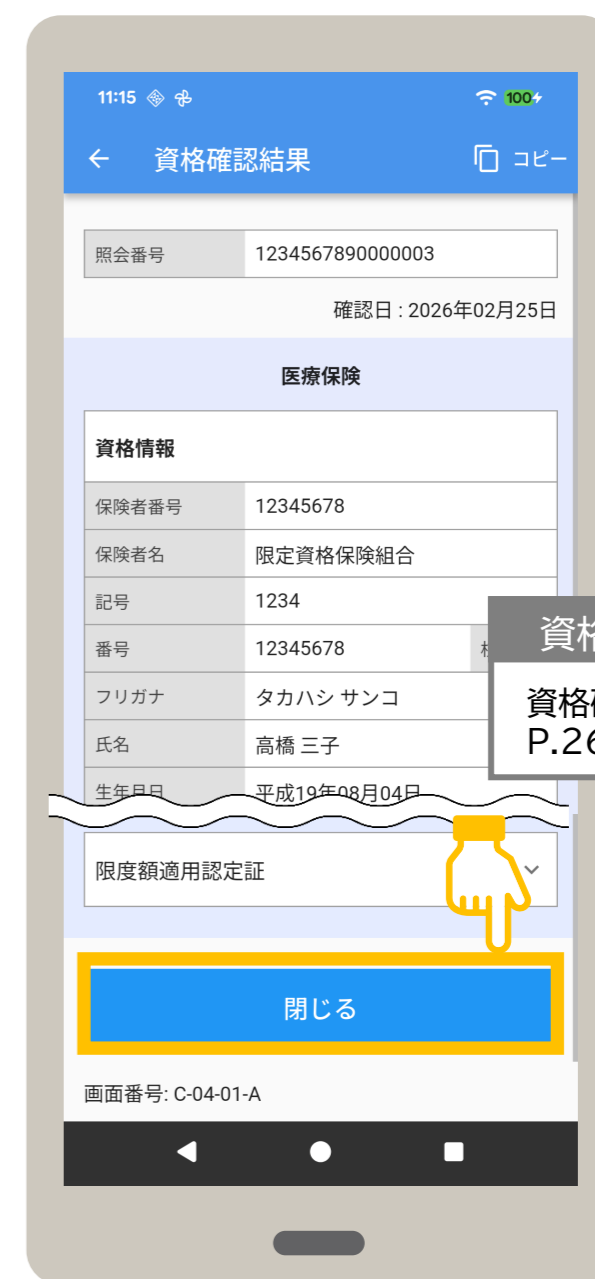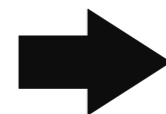

01

メニューを選択します。

セキュリティ設定の資格確認結果検索をタップします。

02

検索結果を選択します。

一覧から確認したい患者の資格確認結果をタップします。

03

資格確認結果を確認します。

資格確認結果が表示されます。表示された内容を確認してください。内容を確認後、資格確認結果を閉じる場合は、閉じるをタップすると、資格確認検索結果画面に戻ります。

資格確認検索結果画面の見方について説明します。

画面の右上にある▽マークをタップすると詳細設定メニューが表示されます。検索期間を変更したり、機関内で登録されている全ての利用端末の資格確認結果を検索対象に変更し、再度、検索を行うことができます。


画面の下部にある左右のボタンをタップすると、ページを移動することができます。

● 資格確認検索結果



資格確認検索結果画面右上の▽をタップすると、詳細設定メニューが画面下部に表示されます。

● 詳細設定

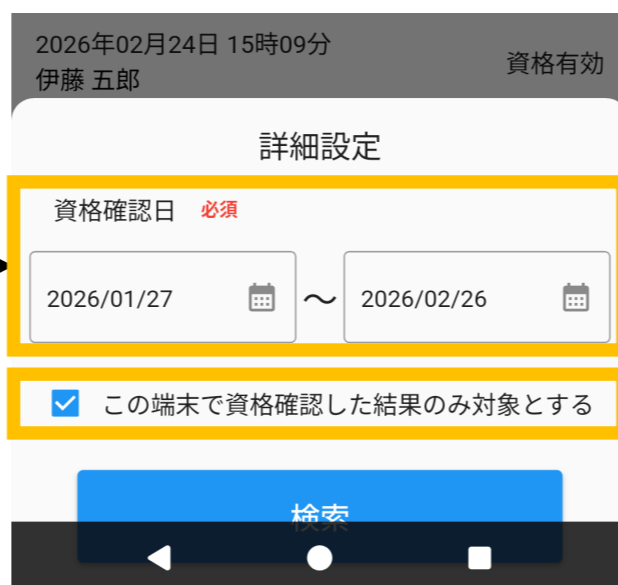

検索期間を指定できます。開始日と終了日を直接入力するか、カレンダーマークをタップして、カレンダーから選択することができます。

「この端末で資格確認した結果のみ対象とする」のチェックを外すと、所属する機関内で登録されている全ての端末の資格確認結果を表示します。

カレンダーから日付を選択する場合



資格確認日の期間指定について

資格確認結果検索は前月1日から検索日当日までを指定することができます。

< をタップすると資格確認検索結果の前のページへ遷移します。
<< をタップすると最初のページへ遷移します。

> をタップすると資格確認検索結果の次のページへ遷移します。
>> をタップすると最後のページへ遷移します。

アカウントパスワードは、総合ポータルサイトで発行したマイナ資格確認アプリユーザ設定情報に記載されたIDに紐づくパスワードのことです。アカウントパスワードを変更する手順について説明します。



パスワード

本アプリを使用する際に入力します。
以下のルールで設定します。

英字の大文字、英字の小文字、数字、
記号の全てを組み合わせ、8文字以上
20文字以下で設定してください。

<使用できる文字種>
英字の大文字:A~Z
英字の小文字:a~z
数 字:0~9
記 号: ` ~ ! @ # \$ % ^ & * _ { }
[] | ; ' < > , . ? - () /

⚠️ **ご注意**
セキュリティのため、入力内容は「***」で
表示されます。

👁️ をタップすると、入力内容を表示する
ことができます。



01

メニューを選択します。

セキュリティ設定のアカウント
パスワード設定をタップします。

02

パスワードを入力します。

アカウントパスワード設定が表示されます。
現在のパスワードと、変更後の新しい
パスワード(2か所)を入力します。


入力した内容でよければ、
変更をタップします。

03

パスワード設定を完了します。

設定完了メッセージが表示されます。
OKをタップすると、アカウントパスワード
設定を完了します。

ログインパスコードは、アプリの起動時に入力するログイン時のパスワード(数字4桁)のことです。
ログインパスコードを変更する手順について説明します。

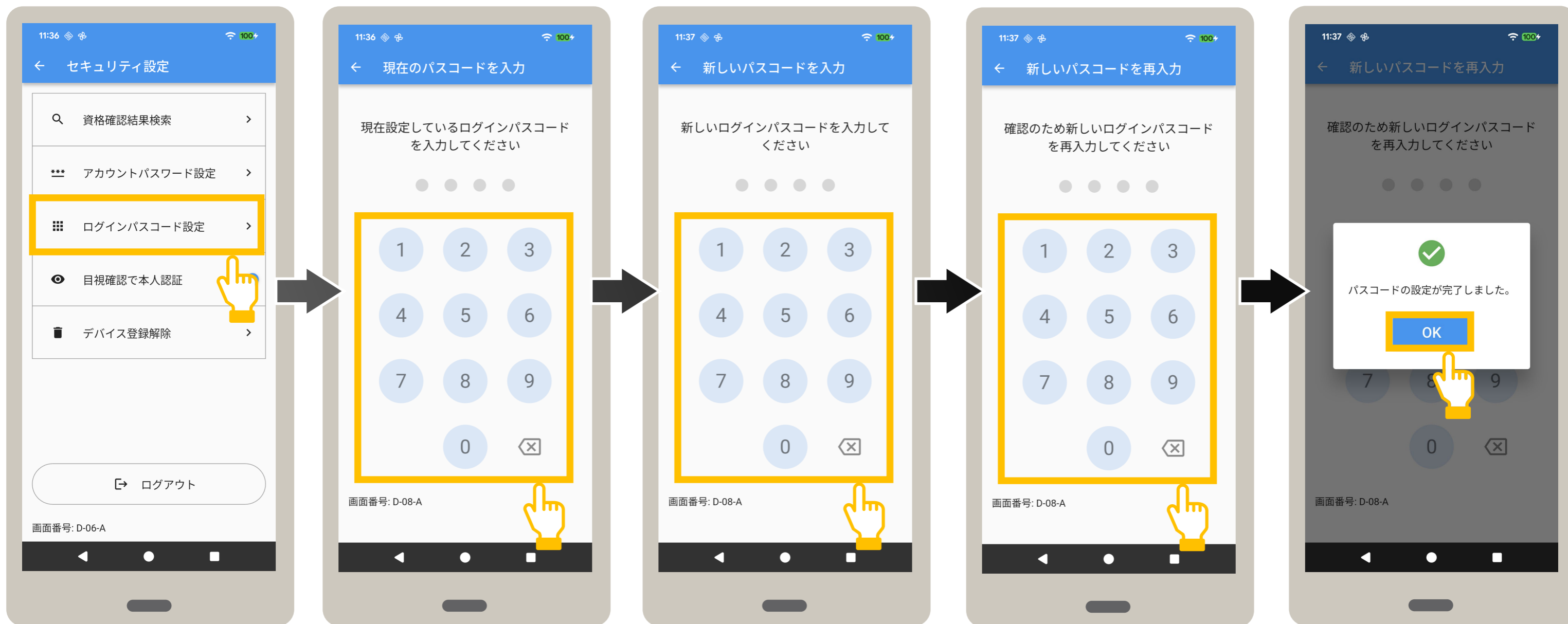

01

メニューを
選択します。

セキュリティ設定のログイン
パスコード設定をタップします。

02

現在のパスコードを
入力します。

ログインパスコード設定が表示されます。
現在のパスコード(数字4桁)をタップ
します。

03

新しいパスコードを
入力します。

パスコードを変更する場合は、
変更後の新しいパスコード(数
字4桁)をタップします。
確認のため、もう一度
新しいパスコード
(数字4桁)をタップ
します。

04

パスコード設定を
完了します。


設定完了メッセージが表示されます。
OKをタップすると、ログインパスコード
設定を完了します。

認証方法選択画面で表示される本人確認方法について、実物のマイナンバーカードの券面写真を目視確認又は実物のマイナンバーカードの暗証番号(4PINコード)で確認のいずれかを選択します。

※スマートフォンのマイナンバーカードを用いた資格確認については、いずれの設定を選択している場合でも利用可能です。




オン

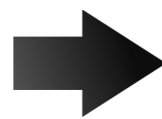

実物のマイナンバーカードの券面写真を目視で確認する、「マイナンバーカード (目視)」が表示されます。

オフ

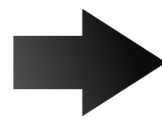

実物のマイナンバーカードの暗証番号で確認する、「マイナンバーカード (暗証番号)」が表示されます。

01

メニューを選択します。

セキュリティ設定の目視確認で本人認証のスライダーをタップします。

使用中のスマートフォン又はタブレットで資格確認を行わない場合は、デバイス登録を解除します。デバイス登録を解除するとアプリの使用もできなくなります。デバイス登録を解除する手順について説明します。



01

メニューを選択します。

セキュリティ設定のデバイス登録解除をタップします。

02

デバイスの登録を解除します。

デバイス登録解除が表示されます。デバイスの登録を解除する場合は、登録解除をタップします。

- 登録解除の確認メッセージが表示されます。登録解除を続行する場合は、登録解除をタップします。
- ※ キャンセルをタップすると、登録解除を中止します。

03

デバイス登録解除を完了します。

登録解除完了メッセージが表示されます。OKをタップすると、デバイス登録解除を完了します。

アプリの利用を終了します。ログアウトする手順について説明します。
 なお、ログアウトした場合は、次回アプリ起動時に、ID及びパスワードの入力が必要になります。



IDとパスワードについて

⚠️ ご注意
 ID及びパスワードは、マイナ資格確認アプリユーザ設定情報に記載されています。
 パスワードをP.9アカウントパスワード設定で変更されている場合、変更後のパスワードを入力してください。
 パスワードを5回間違えると、アカウントがロックされ30分間ログインできなくなります。ロックされた場合はオンライン資格確認等コールセンターまでお問い合わせください。

01

メニューを選択します。

セキュリティ設定のログアウトをタップします。

02

ログアウトします。

確認メッセージが表示されます。
 システムからログアウトする場合は、**ログアウトする**をタップします。
 ※キャンセルをタップすると、ログアウトを中止します。

システムログインが表示されます。
 システムからログアウトしました。

アプリを起動する手順を説明します。

【生体認証する場合の画面イメージ】

【パスコード認証する場合の画面イメージ】

【バージョン更新がある場合の画面イメージ】



01

アプリを選択します。

ホーム画面に登録されているマイナ資格確認アプリをタップします。

02

ログインします。

指紋認証など生体認証でログインする設定にしている場合は、生体認証を行います。

パスコードでログインする場合は、パスコード(数字4桁)をタップします。

※初期登録が完了していない場合は、利用規約が表示されます。P.4を参照し、初期登録を完了してください。

▶▶ P.4

03

アップデートを確認します。

アプリの最新バージョンがある場合は、バージョン更新が表示されます。

ストアページへ移動するをタップし、Playストアに移動後、最新バージョンをインストールします。

バージョン更新について
アップデートがない場合、本画面は表示されません。

【未確認のお知らせがある場合の画面イメージ】




お知らせについて

お知らせのタイトルをタップすると、お知らせの詳細が記載されているWebサイトに進み、内容を確認できます。

お知らせは、後で確認することもできます。

詳細はP.6 メニューの使い方を参照してください。

お知らせがない場合は、本画面は表示されず、次の認証方法選択画面が表示されます。

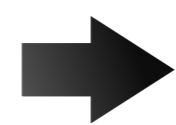

04

お知らせを確認します。

未確認のお知らせがある場合は、お知らせ一覧が表示されます。確認後、閉じるをタップします。

05

アプリの起動が完了しました。

認証方法選択画面が表示されると、起動完了です。

6 実物のマイナンバーカードを用いて資格を確認する (目視確認)

実物のマイナンバーカードの券面写真を目視により確認し本人確認後、資格確認を行います。ここでは認証方法選択画面を表示した状態から説明しています。アプリを終了した場合は、アプリを起動し、認証方法選択画面を表示します。



01

目視確認します。

実物のマイナンバーカードの券面写真により本人であることを目視確認します。

マイナンバーカードの読み取りに進む場合は、マイナンバーカード(目視)をタップします。

02

マイナンバーカードを読み取ります。

マイナンバーカードの読み取りが表示されます。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】



読み取り開始をタップし、スマートフォンのNFC読み取り位置を実物のマイナンバーカードの中央に近づけます。

【カードリーダーで読み取る設定の場合】

カードリーダーに実物のマイナンバーカードをセットし、読み取り開始をタップします。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】

【カードリーダーで読み取る設定の場合】

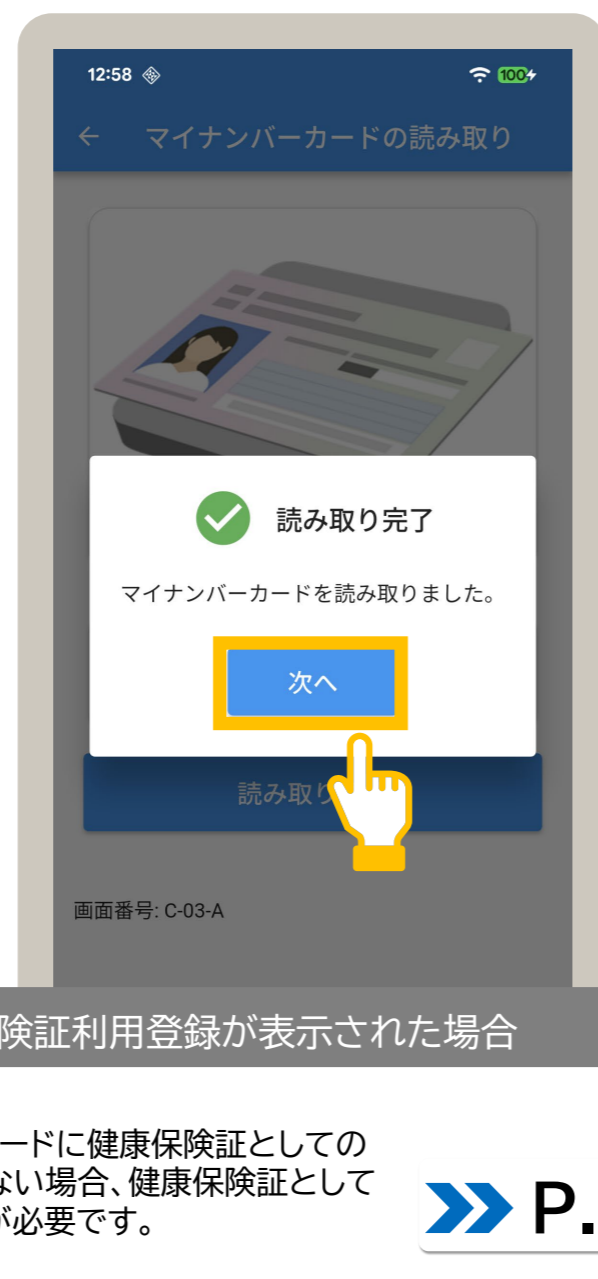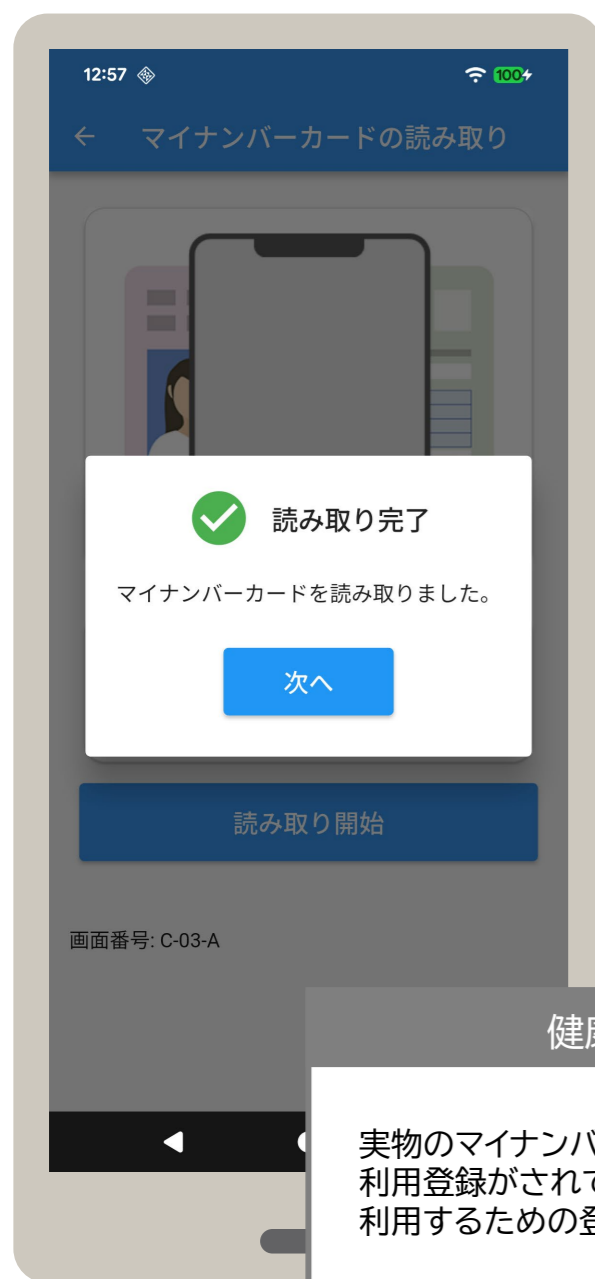

健康保険証利用登録が表示された場合

実物のマイナンバーカードに健康保険証としての利用登録がされていない場合、健康保険証として利用するための登録が必要です。

➡ P.28



資格確認結果について
資格確認結果の見方は
P.26を参照してください。

⚠️ ご注意

資格確認結果画面を閉じた後に、その患者の資格情報を再度確認したいときは、マイナンバーカードを再度読み取る必要があります。

➡ P.16



03

マイナンバーカードの読み取りが完了しました。

読み取り完了メッセージが表示されます。
次へをタップします。



04

資格確認結果を確認します。

資格確認結果が表示されます。
表示された内容を確認してください。
内容を確認後、資格確認結果を閉じる場合は、
閉じるをタップします。

認証方法選択画面が表示されます。

実物のマイナンバーカードの暗証番号により本人確認後、資格確認します。ここでは認証方法選択画面を表示した状態から説明しています。アプリを終了した場合は、アプリを起動し、認証方法選択画面を表示します。

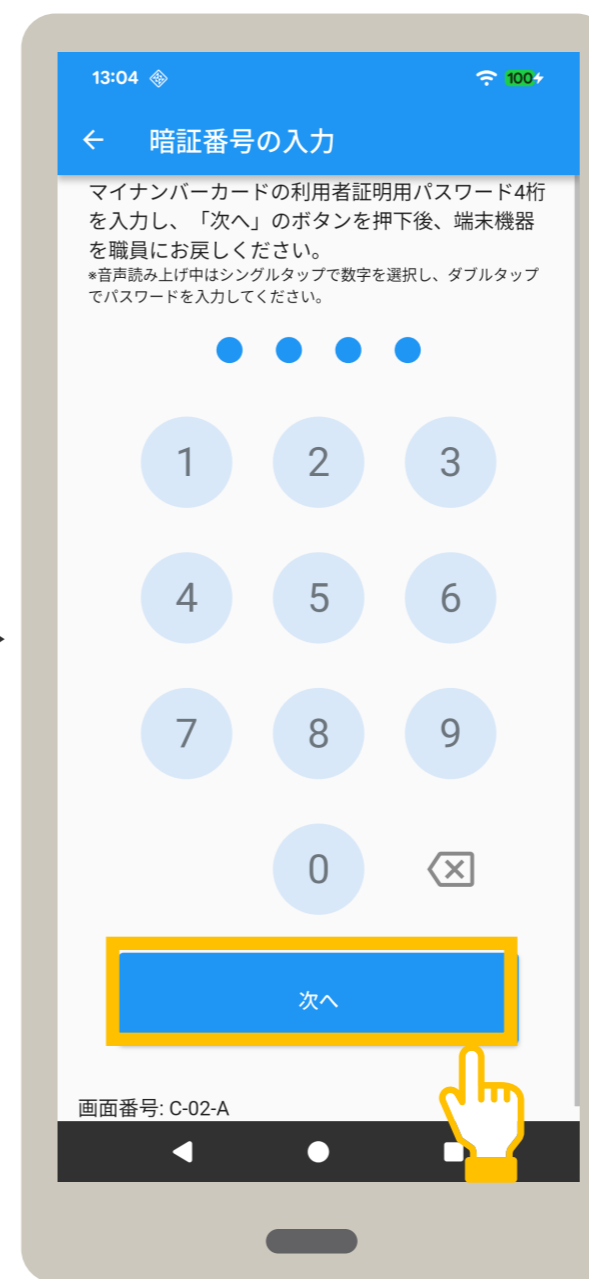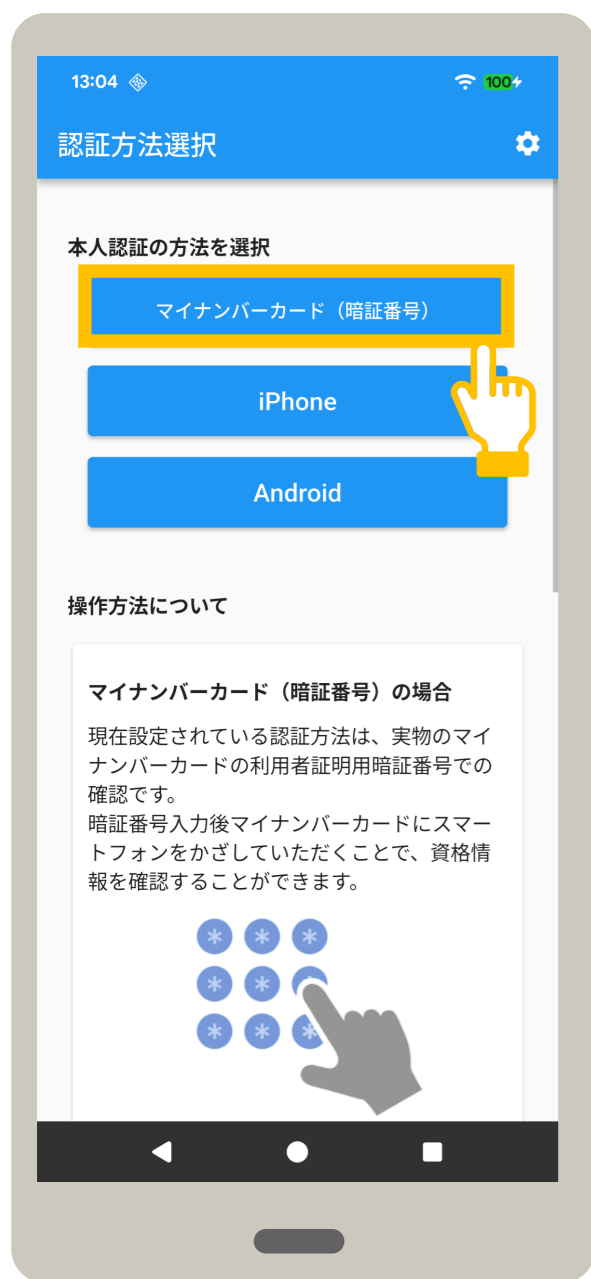

暗証番号について

⚠️ ご注意

マイナンバーカードの暗証番号を3回誤ると不正利用防止のためロックがかかります。ロックを解除したい場合は、住民票のある市町村窓口でパスワード初期化を申請する必要があります。また、暗証番号を忘れてしまった場合は、住民票のある市町村窓口でパスワード再設定を申請する必要があります。なお、これらの申請は、患者本人、患者の法定代理人又は患者の任意代理人が行ってください。

目視確認に切り替える場合

暗証番号入力から目視確認に切り替える場合は、以下の手順で切り替えます。

1. 画面左上の ←(戻る) をタップして認証方法選択画面に戻ります。
2. 画面右上の ⚙️(歯車) > セキュリティ設定 の順に選択します。
3. 目視確認で本人認証のスライダーを右側にします。←(戻る) をタップして認証方法選択画面に戻り、目視確認します。

01

暗証番号で確認します。

実物のマイナンバーカードで暗証番号の入力に進む場合は、**マイナンバーカード (暗証番号)** をタップします。

確認メッセージが表示されます。
OK をタップします。

02

暗証番号を入力します。

暗証番号の入力が表示されます。
患者に実物のマイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)をタップしてもらい、**次へ** をタップします。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】



【カードリーダーで読み取る設定の場合】



【スマートフォンで読み取る設定の場合】



【カードリーダーで読み取る設定の場合】



スマートフォンで読み取る設定の場合

スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る場合、「スキャンの準備ができました。カードまたはスマートフォンをセットしてください。」が表示された後に、カードを読み取り部に置いてください。

健康保険証利用登録が表示された場合

実物のマイナンバーカードに健康保険証としての利用登録がされていない場合、健康保険証として利用するための登録が必要です。

➡ P.28

03

マイナンバーカードを読み取ります。

マイナンバーカードの読み取りが表示されます。

- 【スマートフォンで読み取る設定の場合】
- 読み取り開始をタップし、スマートフォンをセットしてください。
- 【カードリーダーで読み取る設定の場合】
- カードリーダーにマイナンバーカードをセットし、読み取り開始をタップします。
- その中央に近づけます。

04

マイナンバーカードの読み取りが完了しました。

読み取り完了メッセージが表示されます。次へをタップします。



資格確認結果について


⚠️ ご注意

資格確認結果画面を閉じた後に、その患者の資格情報を再度確認したいときは、マイナンバーカードを再度読み取る必要があります。

➡️ P.18

資格確認結果について

資格確認結果の見方はP.26を参照してください。

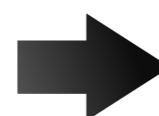

患者が入力

05

資格確認結果を確認します。

資格確認結果が表示されます。表示された内容を確認してください。
内容を確認後、資格確認結果を閉じる場合は、閉じるをタップします。

認証方法選択画面が表示されます。

iPhoneのマイナンバーカードにより本人確認後、資格確認します。ここでは認証方法選択画面を表示した状態から説明しています。アプリを終了した場合は、アプリを起動し、認証方法選択画面を表示します。



01

iPhoneのマイナンバーカードで確認します。

iPhoneのマイナンバーカードで確認する場合、**iPhone**をタップします。

確認メッセージが表示されます。患者にiPhoneのマイナンバーカードの表示と、生体認証の実施をお願いしてください。**OK**をタップします。

02

マイナンバーカードを読み取ります。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】

読み取り開始をタップし、患者のiPhone上部をスマートフォンのNFC読み取り位置に近づけます。

【カードリーダーで読み取る設定の場合】

患者のiPhone上部をカードリーダーの中央に近づけてもらい、読み取り開始をタップします。



カード読み取り時のエラーについて

以下のメッセージが表示された場合、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録がされていません。健康保険証として利用するための登録が必要です。

保険証未登録

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です。患者ご自身のスマートフォンでマイナポータルへアクセスし、手続きをお願いします。

エラーコード:
E-C-04-01-A-6002

閉じる

12:58

資格確認結果

照会番号 1234567890000001
確認日: 2026年02月26日

医療保険

資格情報

保険者番号	12345678	
保険者名	限定資格保険組合	
記号	1234	
番号	12345678	枝番 2
フリガナ	シカク タロウ	
氏名	資格 太郎	
生年月日	昭和28年5月2日	
性別	男	
区分	一般	

閉じる

画面番号: C-04-01-A

資格確認結果について
資格確認結果の見方は
P.26を参照してください。

13:11

認証方法選択

本人認証の方法を選択

マイナンバーカード (暗証番号)

iPhone

Android

操作方法について

マイナンバーカード (暗証番号) の場合

現在設定されている認証方法は、実物のマイナンバーカードの利用者証明用暗証番号での確認です。
暗証番号入力後マイナンバーカードにスマートフォンをかざしていただくことで、資格情報を確認することができます。

資格確認結果について

⚠️ ご注意
資格確認結果画面を閉じた後に、その患者の資格情報を再度確認したいときは、マイナンバーカードを再度読み取る必要があります。

➡️ P.21

03

マイナンバーカードの読み取りが完了しました。
読み取り完了メッセージが表示されます。次へをタップします。

04

資格確認結果を確認します。
資格確認結果が表示されます。表示された内容を確認してください。内容を確認後、資格確認結果を閉じる場合は、閉じる をタップします。

認証方法選択画面が表示されます。

Androidのスマホ用電子証明書により本人確認後、資格確認します。ここでは認証方法選択画面を表示した状態から説明しています。アプリを終了した場合は、アプリを起動し、認証方法選択画面を表示します。



暗証番号について

⚠️ ご注意
Androidのスマホ用電子証明書の暗証番号を3回誤ると不正利用防止のためロックがかかります。暗証番号がロックされてしまった場合は、マイナポータルアプリのメニューから暗証番号の初期化を行ってください。

01

Androidのスマホ用電子証明書で確認します。

Androidのスマホ用電子証明書で確認する場合、**Android**をタップします。

確認メッセージが表示されます。**OK**をタップします。

02


暗証番号を入力します。

暗証番号の入力が表示されます。
患者に4桁の暗証番号(スマホ用電子証明書)をタップしてもらい、**次へ**をタップします。

9 スマートフォンのマイナンバーカードを用いて資格を確認する(Android)

【スマートフォンで読み取る設定の場合】

【カードリーダーで読み取る設定の場合】

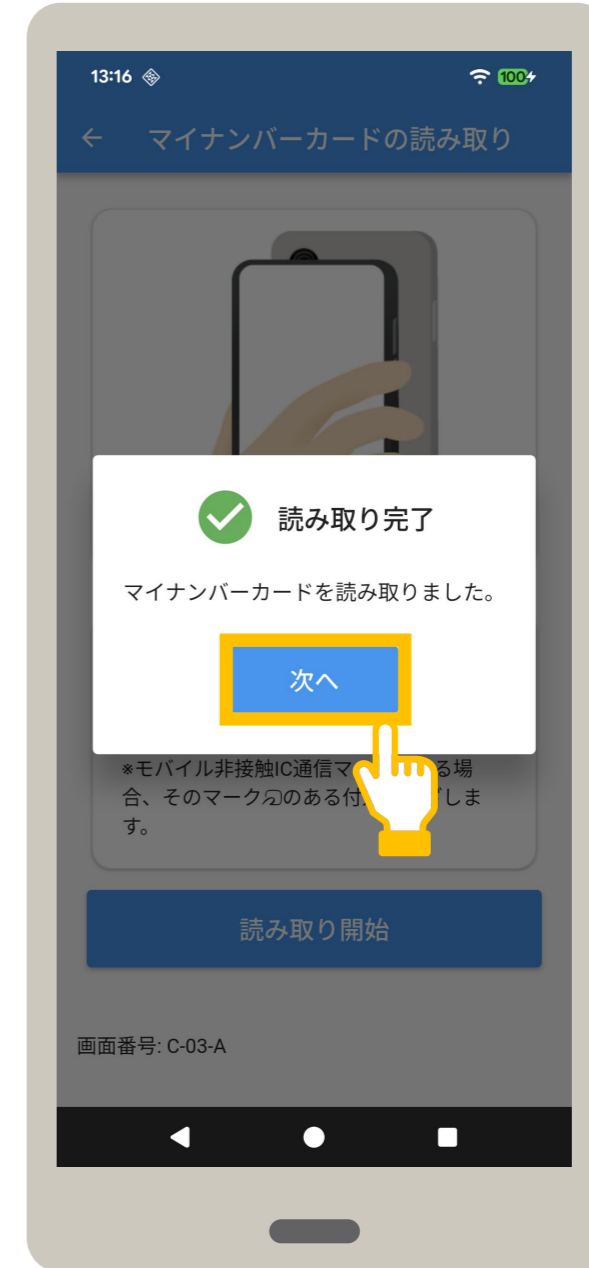

カード読み取り時のエラーについて

以下のメッセージが表示された場合、マイナンバーカードに健康保険証としての利用登録がされていません。健康保険証として利用するための登録が必要です。

i 保険証未登録

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です。患者ご自身のスマートフォンでマイナポータルへアクセスし、手続きをお願いします。

エラーコード:
E-C-04-01-A-6002

閉じる

03

マイナンバーカードを読み取ります。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】
読み取り開始をタップし、患者のスマートフォンのNFC読み取り位置を職員のスマートフォンのNFC読み取り位置に近づけます。

【カードリーダーで読み取る設定の場合】
患者のスマートフォンのNFC読み取り位置をカードリーダーの中央に近づけてもらい、読み取り開始をタップします。

04

マイナンバーカードの読み取りが完了しました。

読み取り完了メッセージが表示されます。次へをタップします。




資格確認結果について

⚠️ ご注意
資格確認結果画面を閉じた後に、その患者の資格情報を再度確認したいときは、マイナンバーカードを再度読み取る必要があります。

➡️ P.23

資格確認結果について

資格確認結果の見方はP.26を参照してください。

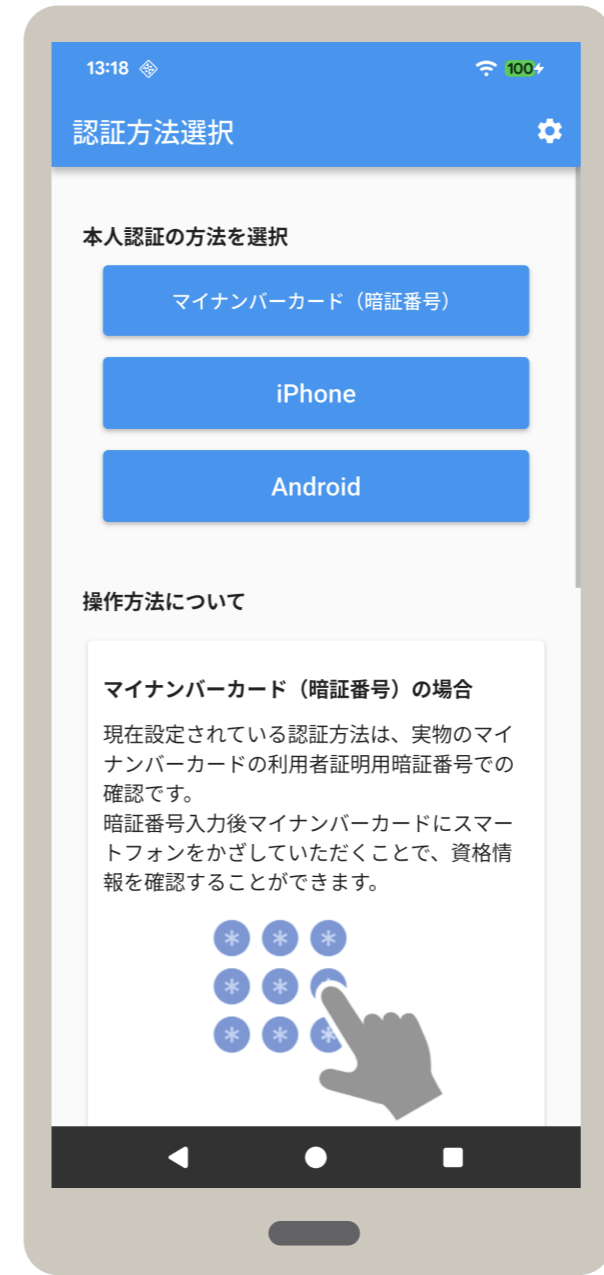

患者が入力

05

資格確認結果を確認します。

資格確認結果が表示されます。表示された内容を確認してください。
内容を確認後、資格確認結果を閉じる場合は、閉じる をタップします。

認証方法選択画面が表示されます。

資格確認結果画面では、患者の資格情報(加入している保険者名、患者の氏名、生年月日など)を確認できます。以下に主なイメージを説明します。閉じるをタップすると認証方法選択画面に戻ります。
 ※表示される項目は、登録されている資格情報によって異なります。

●医療保険情報がある場合

●未就学児の場合

※「義務教育就学前」が表示されます。

●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が残り3カ月の場合

※証明書が失効する旨が表示されます。

●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限経過後の猶予期間内の場合

※証明書が失効した旨が表示されます。

●生活保護受給者の場合

●照会番号が登録されていない場合

※照会番号が未登録の場合、空欄で表示されます。

●資格が無効の場合

●高齢受給者証がある場合


●要配慮情報(備考)がある場合

認証方法選択画面に戻ります


※負担割合:後期高齢者医療制度加入者の場合、窓口で支払う医療費の負担割合が表示されます。

資格確認結果画面では、患者の資格情報(加入している保険者名、患者の氏名、生年月日など)を確認できます。以下に主なイメージを説明します。閉じるをタップすると認証方法選択画面に戻ります。
 ※表示される項目は、登録されている資格情報によって異なります。

●医療扶助情報がある場合

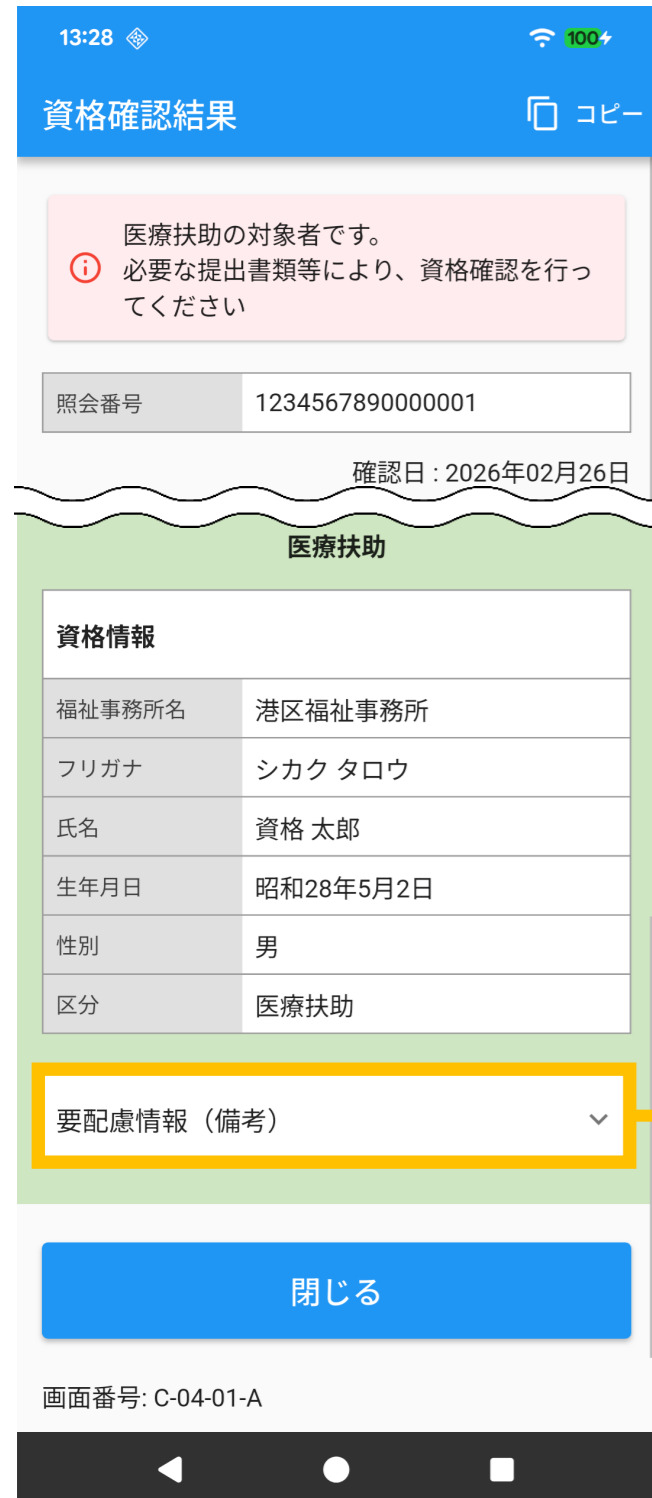

●要配慮情報(備考)がある場合

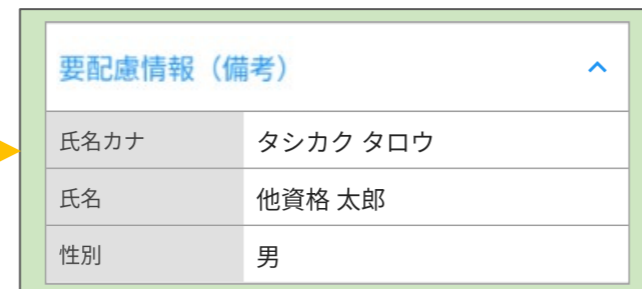

●コピーボタンをタップした場合



資格確認結果画面右上のコピーをタップすると、資格情報をコピーし、任意の場所にテキスト形式で貼り付けすることができます。

※コピーをタップすると、「コピーしました」と表示されます。

実物のマイナンバーカードが健康保険証として登録されていない場合は、「資格を確認する」のマイナンバーカード読み取り完了後に健康保険証の利用登録を行うか選択してください。ここでは利用登録を行う場合について説明します。



01

保険証利用登録をします。

マイナンバーカードの保険証利用登録の選択画面が表示されます。
健康保険証利用登録するをタップします。

02

利用規約を確認・同意します。


利用規約が表示されます。
利用規約の内容を確認後、利用規約に同意する場合は、同意するをタップします。

03


マイナンバーカードを読み取ります。

マイナンバーカードの読み取りが表示されます。
【スマートフォンで読み取る設定の場合】
読み取り開始をタップし、スマートフォンのNFC読み取り位置をマイナンバーカードの中央に近づけます。
【カードリーダーで読み取る設定の場合】
カードリーダーに実物のマイナンバーカードをセットし、読み取り開始をタップします。

【スマートフォンで読み取る設定の場合】

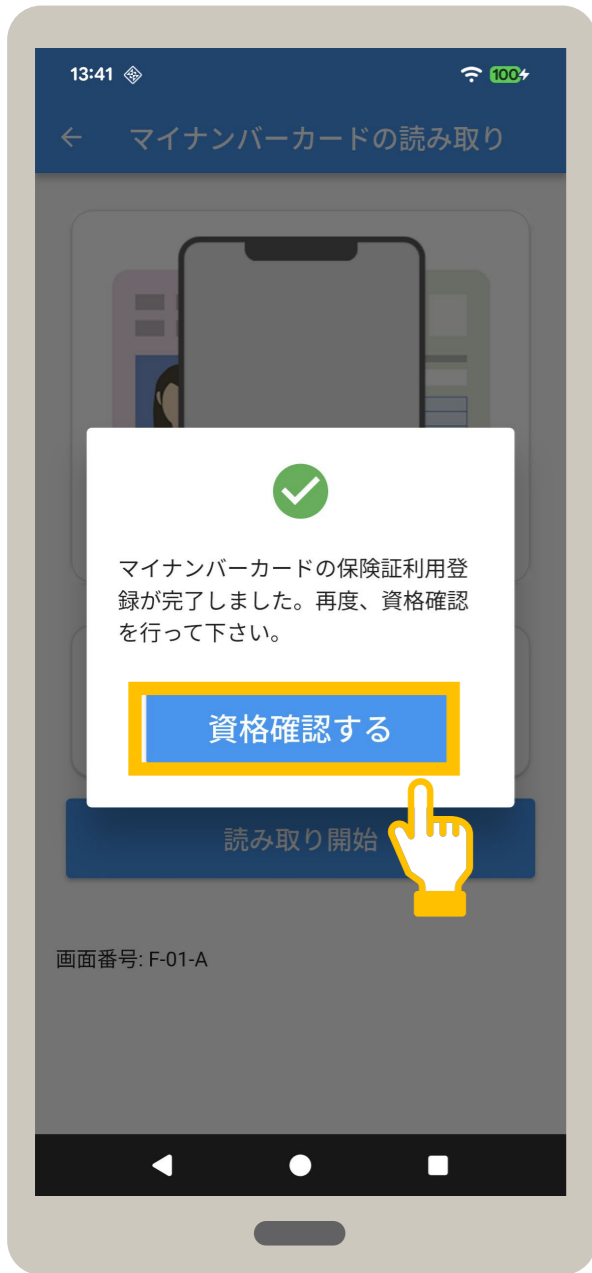


【カードリーダーで読み取る設定の場合】

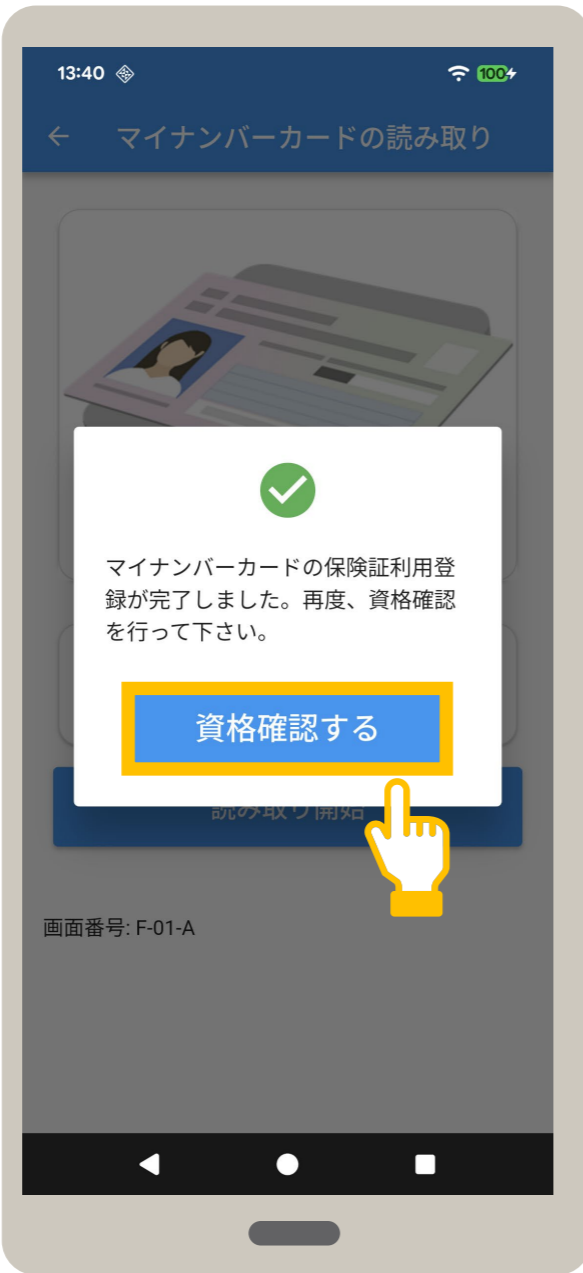

カード読み取り時のエラーについて

以下のメッセージの場合は、健康保険証利用登録の処理中ですので、少し時間を置いてから再度資格確認を行ってください。

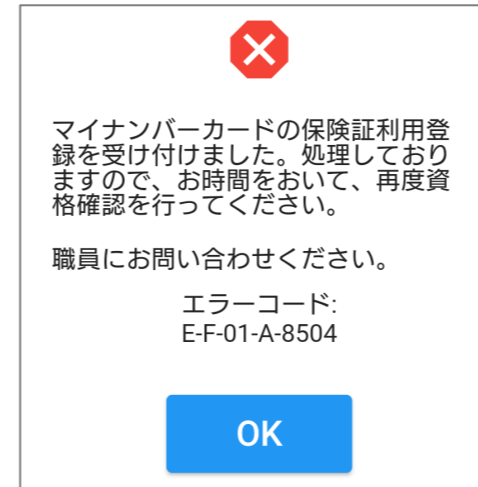

以下のメッセージの場合は、健康保険証利用登録に失敗しています。同じマイナンバーカードを使用して、再度健康保険証利用登録を行ってください。



04

マイナンバーカードの読み取りが完了しました。

マイナンバーカードの保険証利用登録完了メッセージが表示されます。
資格確認するをタップすると、保険証利用登録を完了します。

05


引き続き、資格確認を行います。

保険証利用登録が完了した後に、再度、資格確認を行ってください。

Bluetoothカードリーダーを使用する場合の設定手順について説明します。
Bluetoothカードリーダーの使用方法については、カードリーダーの取扱説明書等を確認してください。

接続のイメージ

Bluetoothカードリーダーからマイナンバーカードを読み取ることができます。
スマートフォン又はタブレットとBluetoothカードリーダーの接続方法は、カードリーダーの取扱説明書等を参照してください。

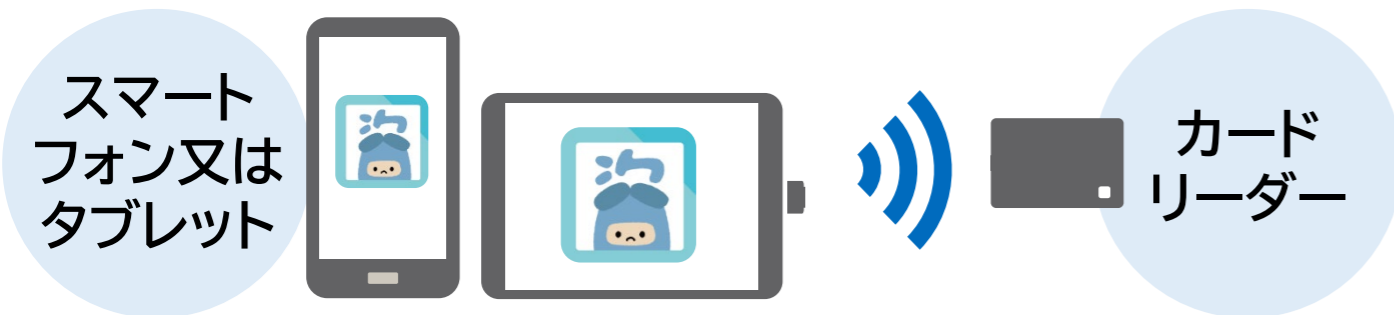

設定手順について

インストールしたアプリで、Bluetoothカードリーダーを使用できるように以下の流れで設定します。

1 Bluetoothを有効にする [▶▶ P.30](#)

2 アプリの設定をする [▶▶ P.31](#)


Bluetoothを有効にする

Bluetoothを有効にします。

1 Bluetoothカードリーダーの電源を入れます。
Bluetoothカードリーダーの電源の入れ方は、
カードリーダーの取扱説明書等を確認してください。



2 画面を上から下へスワイプします。

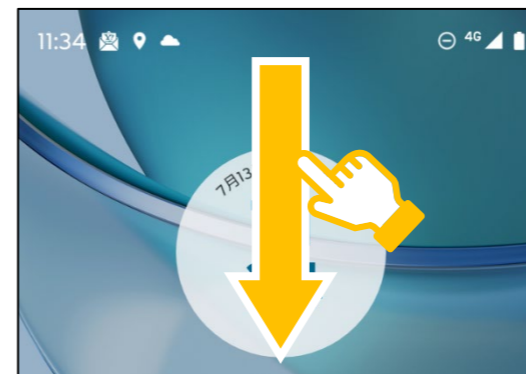

3 「Bluetooth」をタップして、有効にします。



続いて
マイナ資格確認
アプリの設定をします

[▶▶ P.31](#)

スマートフォン又はタブレットでBluetoothカードリーダーからマイナンバーカードを読み取れるようにアプリを設定します。マイナンバーカードの読み取り方法をスマートフォンからBluetoothカードリーダーへ変更します。



01

メニューを選択します。

認証方法選択画面の画面右上にある ⚙️ (歯車) をタップします。

メニューが表示されます。
カード読み取り方法設定をタップします。

02

カードの読み取り方法を選択します。

カード読み取り方法設定が表示されます。
Bluetoothカードリーダーで読み取りをタップします。



03

カードリーダーを検索し、選択します。

カードリーダーを探すをタップします。

- カードリーダー接続が表示されます。
- カードリーダーに接続する場合は、使用するカードリーダーをタップします。

接続完了メッセージが表示されます。
OKをタップします。


04

設定を確認します。


メニューに戻ります。
カード読み取り方法設定に、Bluetoothカードリーダーで読み取りと表示されたことを確認します。

スマートフォンでマイナンバーカードの読み取りを行う場合、NFCの設定を有効にする必要があります。以下の手順で、NFCの設定が有効になっているか確認し、無効(オフ)になっている場合は有効(オン)にしてください。


1 画面を下から上へスワイプします。

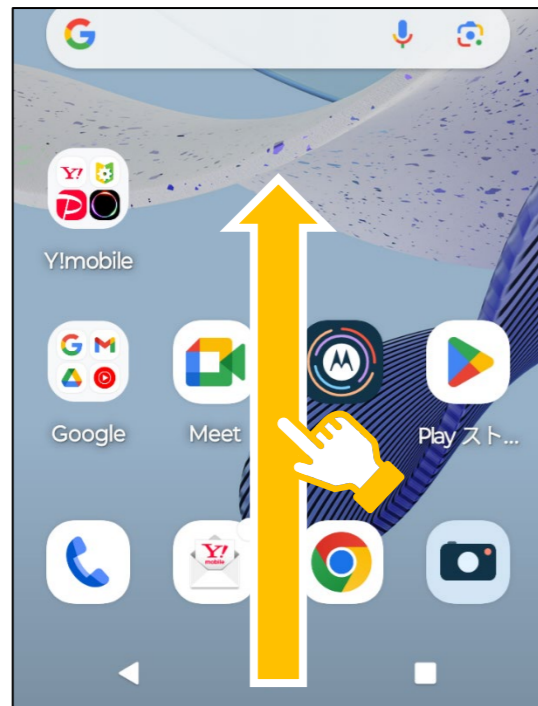


2 「設定」をタップします。

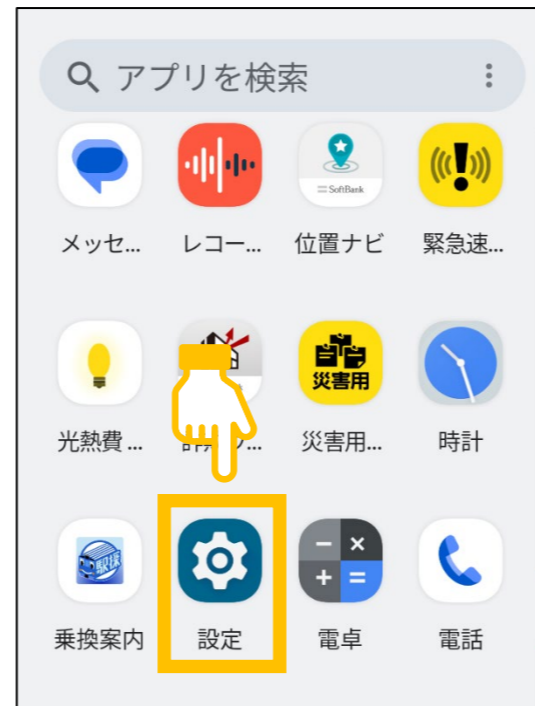


3 「接続済みのデバイス」をタップします。

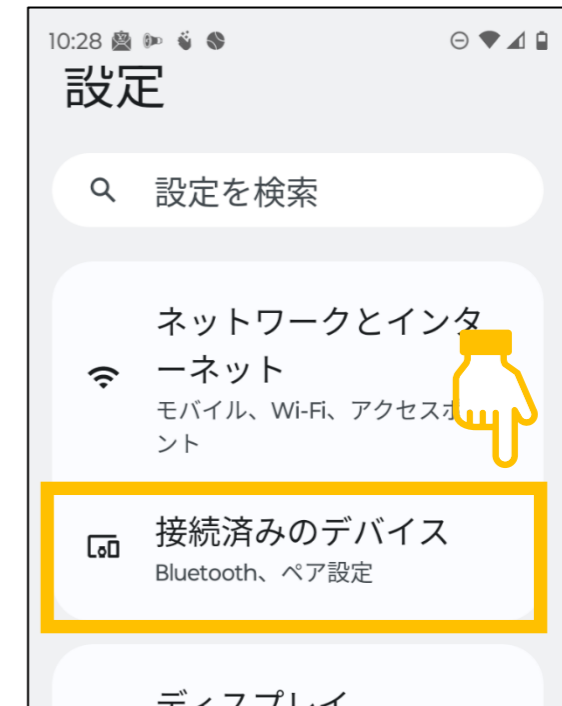

4 「接続の設定」をタップします。

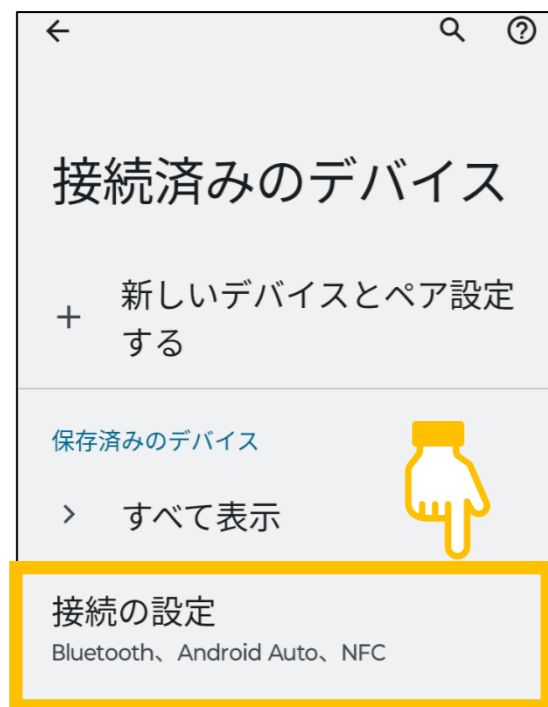

5 「NFC」をタップします。

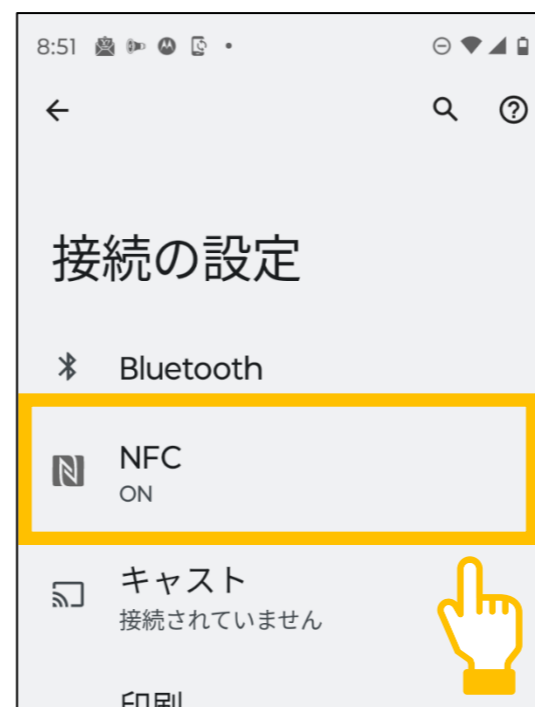

6 「NFCを使用」をタップし、有効にします。



改訂履歴

No.	改訂日	改訂箇所	改訂内容	版数
1	2024/1/24	—	初版	1.00
2	2024/3/25	P1,P19	<ul style="list-style-type: none">生活保護受給者の医療扶助資格に関する画面表示を追加資格確認結果画面項目に“被保険者氏名”(本人または世帯主氏名)の追加	1.10
3	2024/7/29	P7, P8,P22	<ul style="list-style-type: none">資格確認結果検索の使い方に関する説明を追加資格確認結果画面のコピーボタンに関する説明を追加	1.20
4	2024/10/1	P1,P2,P25	<ul style="list-style-type: none">スクリーンショット制御に関する説明を追加Google Playストアのアプリインストールページの二次元バーコードを追加カードリーダー接続時のバッテリー残量表示に関する説明を追加	1.21
5	2024/11/8	P7,P17,P20, P21,P22	<ul style="list-style-type: none">マイナ保険証一体化の対応に伴う証区分の名称変更による画像の差し替えマイナ保険証一体化の対応に伴う証明書有効期限経過後の猶予期間内におけるメッセージの追加	1.30
6	2024/12/23	P6,P7,P17, P20,P21, P22	<ul style="list-style-type: none">照会番号対応に伴う画像の差し替え照会番号に関する説明を追加	1.40
7	2025/4/6	P1,P3~P27	<ul style="list-style-type: none">画面ID表示に伴う画像の差し替え医療扶助情報がある場合に関する説明を追加マイナンバーカードを健康保険証として利用する説明を追加	1.50
8	2025/12/2	全体	<ul style="list-style-type: none">保険証廃止に伴う文言修正 証区分→区分に修正 裏面記載情報→要配慮情報(備考) 等表記ゆれの修正電子証明書有効期限切れに関するメッセージ変更に伴う画面の差し替え	1.51
9	2026/3/23	全体	<ul style="list-style-type: none">スマートフォンのマイナ保険証対応に伴う画像の差し替えスマートフォンのマイナ保険証対応に関する説明を追加	1.52